

PROPHYflex™ 4

Systeme d'air abrasion avec spray de pulvérisation




PROPHYflex™ 4

Un aéropolisseur ergonomique, polyvalent, au design soigné

Le PROPHYflex™ 4 est un outil **tout-en-un** permettant de traiter les zones-**supra-gingivales** ou **sous-gingivales**. Adapté à presque toutes les situations cliniques, il possède une **ergonomie parfaite** avec deux poignées de longueurs différentes.

Les **trois niveaux de nettoyage** facilement réglables, et le jet à poudre ciblé préservant la substance des dents (**économie tissulaire**), permettent d'éviter un brouillard gênant et font de l'aéropolissage une solution adaptée aux traitements prolongés.

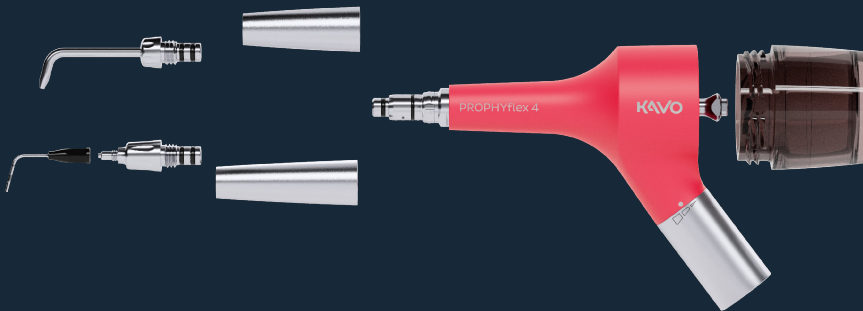

Indications thérapeutiques :

Nettoyage supra-gingivale :

- **Élimination indolore** des tâches, de la plaque dentaire et du biofilm
- Nettoyage en profondeur des implants, des couronnes et des bridges (avec la poudre PERIO)

Nettoyage sous-gingivale (avec kit et poudre PERIO) :

- Élimination efficace du biofilm dans les poches parodontales


Points forts



- **Ergonomie** irréprochable parfaitement adapté à de longues séances
- Meilleure **visibilité** durant le nettoyage des zones supra-gingivales grâce à une étroite canule




- Deux manchons **antidérapants** de longueurs différentes pour une prise en main parfaite
- **Rotation à 360°** facilitant l'accès aux zones difficiles

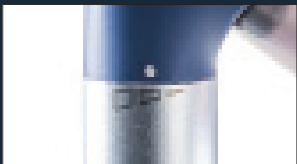


3 niveaux de puissance :

Niveau 1 → nettoyage sans poudre pour éliminer les résidus de poudre présents sur les dents et dans l'instrument après traitement

Niveaux 2 et 3 → ajustement de la puissance de nettoyage en fonction du patient et du lieu d'application

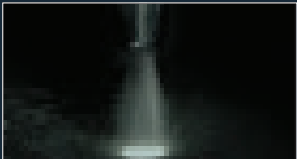


Jet de poudre précis, ciblé et homogène empêchant la dispersion de poudre et l'effet brouillard. Meilleure protection de la structure dentaire

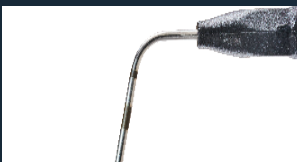

Utilisation en **sous-gingivale grâce au kit PERIO**

PROPHYflex 4 (vendu avec 10 inserts). L'insert PERIO est rapide à fixer, fin et stable avec repères de profondeur, étroit pour une excellente visibilité, hygiénique et réutilisable (10 cycles d'utilisation /insert)

Réf. 1.011.9403 - PROPHYflex 4 Perio Kit

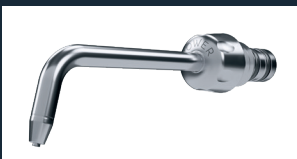

Power cannula en option pour un traitement plus rapide et plus puissant

Réf. 3.002.8000 - PROPHYflex 4 BLEU

Réf. 3.004.5900 - PROPHYflex 4 BLEU S (raccord Sirona)

Réf. 3.002.8800 - PROPHYflex 4 ROSE

Réf. 3.004.5950 - PROPHYflex 4 ROSE S (raccord Sirona)

Réf. 3.002.8200 - PROPHYflex 4 CITRON

Réf. 3.004.5930 - PROPHYflex 4 CITRON S (raccord Sirona)

Compatibles avec les 3 poudres suivantes :



Poudre KaVo PROPHYpearls :

Pour une prophylaxie en douceur, complète et parfaitement propre. Indiqué en **supra-gingivale**. Le Principe actif est le carbonate de calcium avec particules de 60 à 70 μm qui est biodégradable, sans sel, sans sucre et sans gluten.

Avantages : forme ronde et taille uniforme pour un nettoyage optimal et **peu abrasif**. Disponible en 4 parfums (menthe, pêche, cassis, orange) et 2 versions neutres

Réf. 1.010.1798 - PROPHYPEARLS KAVO NEUTRE (4 x250 g)

Réf. 1.010.1828 - PROPHYPEARLS KAVO MENTHE (80 sticks de 15g)

Réf. 1.010.1830 - PROPHYPEARLS KAVO ORANGE (80 sticks de 15g)

Réf. 1.010.1831 - PROPHYPEARLS KAVO CASSIS (80 sticks de 15g)

Réf. 1.010.1829 - PROPHYPEARLS KAVO PÊCHE (80 sticks de 15g)

Réf. 1.010.1826 - PROPHYPEARLS KAVO NEUTRE (80 sticks de 15g)

Réf. 1.013.4400 - PROPHYPEARLS Sélection 4 x 20 sticks de 15 g (menthe,pêche,orange,cassis)



Poudre KaVo PROPHYflex :

Indiqué en **supra-gingivale**

Principe actif : bicarbonate de sodium avec particules de 60 à 70 μm , hydrosoluble

Avantages : un traitement **simple, rapide** et efficace avec quatre parfums au choix (orange, fruit rouge, cerise, menthe)

Réf. 1.007.0014 - Poudre PROPHYflex orange (80 sticks de 15g)

Réf. 1.007.0017 - Poudre PROPHYflex menthe (80 sticks de 15g)

Réf. 1.007.0015 - Poudre PROPHYflex berry (80 sticks de 15g)

Réf. 1.007.0016 - Poudre PROPHYflex cherry (80 sticks de 15g)



Poudre pério KaVo PROPHYflex :

Indiqué en **supra-gingivale** pour le nettoyage en profondeur des couronnes, bridges et implants, et en **sous-gingivale** pour le nettoyage des poches parodontales.

Principe actif : poudre de glycine fine (18-22 μm) qui protège les gencives.

Avantages : **très douce et peu abrasive**

Réf. 1.009.3732 - Poudre PROPHYflex Perio (4 bouteilles de 100g)